

停電時の対応方法を皆さんで確認しませんか？

このページの巻末、「ダウンロードデータ一覧」より『療養機器の一覧表』をダウンロードし、必要項目を記入の上、停電時に備えご家族・ケアスタッフで内容の確認と共有を図りましょう。

1. 停電時における人工呼吸器の駆動時間を確認しましょう。

停電時の人工呼吸器の駆動時間を確認し「人工呼吸器」の欄に必要な項目を記入して、ケアに関わる方々で停電に何時間耐えられるのか確認しましょう。

	トリロジー100	トリロジーEvo	アストラル
			
内部バッテリー	3時間	7.5時間	8時間
外部バッテリー	3時間	7.5時間	8時間
総駆動時間	6時間	15時間	16時間

記入例

	物品名	機種名	給電方法	代替方法	停電時の駆動可能時間
人工呼吸器	人工呼吸器	Torilogy evo	AC電源 内臓バッテリー+外部バッテリー	アンビューバッグの使用	15時間

2. 加温加湿器、吸引機、酸素濃縮器、ベッドなどの給電方法と停電時の代替方法を確認しそれぞれの欄に記入しましょう。

加温加湿器

加温加湿器の給電は基本的にAC電源です。人工鼻への付け替えを検討しましょう。

吸引機

吸引機はバッテリーを搭載したものと搭載していないものがあります。以下を参考に確認ください。またバッテリーでの駆動に際してAC電源使用に比べ吸引圧が下がるものもあるため、事前にバッテリーでの吸引を試してみてください。

機種名

内臓バッテリー作動時間



ミニックDC-II

ノーマルモード40分



ミニックⅢ-S
ミニックⅢ-W

AC電源のみ



ミニックⅢ-SB
ミニックⅢ-WB

ノーマルモード60分

ノーマルモード40分



セパⅢ

AC電源のみ

セパⅢB

40分



エマジン1200S

AC電源のみ



エマジン3WAY-750S

通常モード90分



ブルークロス 3WAY

通常モード90分

エアマット

送風チューブを折り曲げてガムテープで固定するなどの対応で2週間程度は底着きなく使用できます。しかし停電時は圧切り替え動作はないため、除圧効果は低下しますので、頻回の体位交換又は早めの給電の検討が必要です。



ベッド

停電時は原則リモコンでの高さ・角度の操作は困難です。事前に停電が想定される場合は、ご本人が長時間負担なく過ごすことができる角度に設定してください。

リフト・段差昇降機

いざというときに避難ができるよう介護用リフトや段差昇降機にバッテリーが付属しているかどうかの事前の確認も必要です。



3. 停電時の駆動可能時間に×がついた項目の給電方法を検討しましょう。

ポータブル蓄電池

事前に充電しておくことで停電時の給電が可能です。蓄電池の容量により重さや大きさ、使用できる電化製品の種類が変わってきます。



発電機

ガソリンやガスなど燃料を使って発電します。
大きな動作音や排気ガスが発生するため、基本的には屋外での使用になります。




乗用車からの給電

市販の「正弦波カーインバーター」を使うことでシガーソケットや車載バッテリーからAC100V電源をとることができます。またトヨタのアクアやプリウス、三菱のアウトランダーPHEV、HONDAのN-VAN e:等EV車・HEV車は標準でアクセサリコンセントを装備しているため1500W 100V程度の給電が可能です。販売店にご確認ください。



4. 災害時伝言ダイヤルを使った連絡方法を確認しましょう。

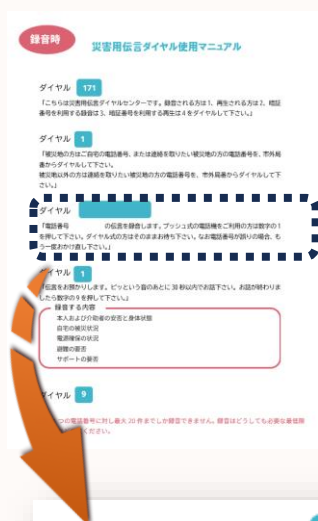

1. このページの巻末、「ダウンロードデータ一覧」より『災害用伝言ダイヤル使用マニュアル』をダウンロード。
2. wordで当事者・家族・支援者で共有する電話番号を「ダイヤル」の部分に入力。
3. 関係者に配布し災害時伝言ダイヤルの録音・再生手順を共有してください。

※「毎月1日と15日」「正月三が日」「防災週間」は災害用伝言ダイヤルの体験利用ができます。ケアチームで試してみてください。

ダイヤル

ここに入力

「電話番号 _____ の伝言を録音します。プッシュ式の電話機をご利用の方は数字の1を押して下さい。ダイヤル式の方はそのままお待ち下さい。なお電話番号が誤りの場合、もう一度おかけ直し下さい。」

5. 事前に停電情報お知らせサービスへ地点登録し、停電発生時に情報を受け取れるようにしましょう。また、登録地域の停電状況が地図を使って視覚的に把握できます。

【スマートフォンの方】

QRコードよりダウンロードください

【スマートフォン以外の携帯電話の方】

中部電力パワーグリッドHPへアクセス
ホーム>ご案内>一般のお客さまへのご案内>
安心してお使いいただくためのお願い>停電に関する情報>
停電情報お知らせサービス>スマートフォン以外の携帯電話をご利用のお客さま
よりメール配信サービスをご利用いただけます。

現在の停電情報も中部電力パワーグリッドHPより確認できます。

停電情報お知らせサービス

かんたん設定ガイド

App Store・Google Playから
「停電情報お知らせサービス」アプリを
ダウンロードしてください。

IOSはこちら

Androidはこちら

※ご利用にはiPhone・AndroidのOSバージョンが必要です。



停電に関するお問い合わせ先

中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークコールセンター

TEL：0120-985-232（年中無休）

【中部電力パワーグリッドからのご案内】

中部電力パワーグリッドへ在宅医療機器使用情報を共有することで、停電発生時等に情報提供を受けることが可能です。ご提供がお済みでない方はぜひご活用ください。



中部電力パワーグリッド

むすぶ。ひらく。

CHUBU
Electric Power

在宅医療機器をご使用の皆さまへ

中部電力パワーグリッドでは、停電でご迷惑をおかけすることのないよう、日々取り組んでおります。しかしながら、雷、地震、台風、大雪などの自然災害による停電を完全に防ぐことは困難です。また、被害の規模によっては、電気をお届けするまでに十数時間、あるいは数日間を要することもあります。

■自然災害による被害例



台風被害 飛来物による電線接触・断線



大雪被害 倒木による電線接触・断線

このような非常事態においては、在宅医療機器を長時間使用できないことが想定されます。そのため、在宅医療機器をご使用のお客さまご自身で、**日頃より以下の点について備えていただくことを、おすすめします。**

- あらかじめ停電を回避する手段、あるいは停電の影響を最小限にする手段を講じておく。
（非常用バッテリーや、電源ポンプ等のバックアップ機器を常備するなど。）
- バックアップ機器を保有している場合は、定期点検を実施する。
- 停電が長期化し、保有するバックアップ機器の限界を超えた場合に、危険な状況を回避するため、対応可能な医療機関や避難先を選定しておく。
- 非常時の連絡先（対応依頼・相談先）をあらかじめ確認しておく。

少しでも早く電気を届けられるよう、停電復旧には全力を尽くして参りますので、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

停電に関するご意見・ご要望、停電情報のお問い合わせは、弊社へご連絡ください。また、停電情報については、弊社ホームページでもご確認いただけます。

中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークコールセンター

連絡先 0120-985-232

（受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00）
※受付に際しては、お名前とご住所をお知らせください。
※本番に際しては、お名前をお知らせください。

中部電力パワーグリッド 停電
https://chuden.jp/powergrid/
chuden.co.jp/powergrid/



中部電力パワーグリッド

いざと
いこうのために

在宅医療機器をご使用の皆さまへ

中部電力パワーグリッド株式会社では、停電でご迷惑をおかけすることのないよう、日々取り組んでおります。雷、地震、台風、大雪などの自然災害による停電を完全に防ぐことは困難です。また、被害の規模によっては、電気をお届けするまでに十数時間、あるいは数日間を要することもあります。このような非常事態においては、在宅医療機器を長時間使用できないことが想定されます。そのため、弊社では、長期間の停電により人命に影響を及ぼすお客さまの情報を登録・管理し、災害時・停電時に御旧情報の提供や、かかりつけ医や親族宅への避難推奨、可能な限りの電力の優先供給と状況に応じたポータブル発電機の準備に努めております。

つきましては、以下の患者様情報の提供にご承諾いただきますよう、ご協力をお願いいたします。ご協力いただける場合は、以下の項目に記入の上、裏面下部の連絡先へ郵送・FAXにより提出してください。なお、患者様情報は、災害時・停電時のみに使用し、目的外に使用しません。

- 患者氏名 () (歳)
- 住所
- 緊急連絡先（続柄）
 - ① 氏名： () TEL： ()
 - ② 氏名： () TEL： ()
- ご使用の在宅医療機器
 - 人工呼吸器 - たん吸引機 - その他
- ご使用の時間帯
 - 24時間 - 夜間のみ - その他
- 停電時の対策
 - バッテリー 時間
 - 予備ポンプ 時間 (時間 × 本)
 - その他（設備名/対応可能時間） / 時間
- 停電情報お知らせサービスの登録（サービス内容は裏面参照）
 - 済み - これから登録予定 - 無し
- その他連絡事項

※情報提供いただくことで弊社ができることは以下のとおりです。

- ① 停電情報や通信機器の故障
- ② 停電の発生（24時間監視）が完了される場合の、かかりつけ医、親族宅への避難推奨
- ③ 可能な限りの優先供給やポータブル発電機の貸出

ただし、①②については基本事項となりますが、③については必ずしも保証できないお客様に対し、可能な限りでの対応となるため、災害情報やポータブル発電機の稼働率の状況によっては、対応できない場合もございます。このため、優先供給やポータブル発電機の貸出を必ずお約束するものではありません。

上記の内容について、中部電力パワーグリッド株式会社及び長野県へ提供することに同意します。

年 月 日 印（自署の場合は押印不要）

患者様情報に変更があった場合は、下記の連絡先まで情報提供をお願いします。

中部電力パワーグリッド株式会社 TEL：0120-985-232

記入例

	物品名	機種名	給電方法	代替方法	停電時の駆動可能時間
人工呼吸器	人工呼吸器	Torilogy100	AC電源 内臓バッテリー+外部バッテリー6時間	アンビューバッグの使用	6時間
	加温加湿器	VHB100	AC電源	人工鼻で代替	—
吸引器	吸引器	SEPA- II	AC電源	足踏み式吸引器で代替	—
	口腔内持続吸引器	SPIT-Q1	AC電源		×
	気管内吸引器	AMOR-SU1	AC電源		×
	足踏み式吸引器	足踏み式吸引器 QQ	電源不要		—
意思伝達装置・センサー	重度障害者用意思伝達装置	miyasuku SW	内臓バッテリー約2時間	透明文字盤で代替	2時間
	タッチセンサー	ポイントタッチスイッチ	AC電源	miyasukuSWのコールで代替	—
	ワイヤレスホームコール		AC電源	miyasukuSWのコールで代替	—
ベッド・マットレス	ベッド		AC電源		×
	マットレス	エアマット STAGEA	AC電源	停電時対策バルブで2週間保持可能	2週間
その他	酸素濃縮器		AC電源	普段は未使用	×
	酸素ポンプ		電源不要	普段は未使用	
	カフアシスト	カフアシスト E70	AC電源+外部バッテリー3時間		—