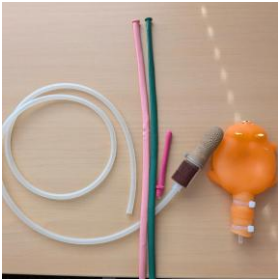


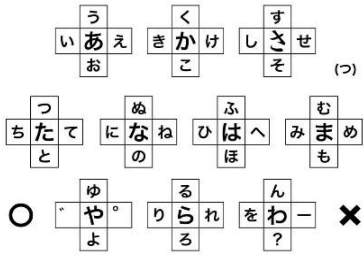
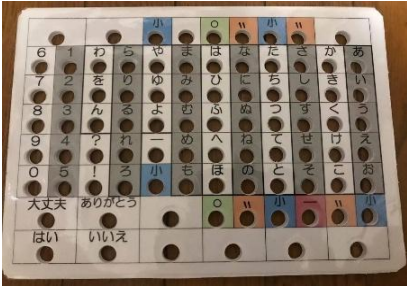
機器の貸し出しについて

県の難病相談支援センターでも「在宅難病患者等療養生活用機器貸出事業」として機器類の貸し出しがありますが、長野県支部でも寄贈いただきました貴重な機器を有効活用させていただきます。

- *貸出対象者・・・**会員**（会員でない方は入会頂ければと存じますがご相談ください）
- *貸出期間・・・・・・**2か月以内**（延長を希望される場合はご相談ください）
- *貸し出し費用・・・**無料**（ただし、**機器貸出時・返却時の送料はご負担**いただきます）
- *レビューを記入いただく場合があります。
- *貸し出し申し込み先・返却先　　・・長野県支部事務局（原山） 026－263－6335

長野県支部貸出機器一覧

種類	機器名	イメージ	機器の概要	貸し出し内容
スイッチ類	ピエゾニューマチックセンサー スイッチ （パシフィックサプライ社製）		空気圧、歪みセンサーを利用し操作するスイッチ。持続出力（長押し）が必要な操作には不向きです。 操作部位：額、頬、指等	コントロールボックス（2） ピエゾセンサー（4） ディップスポンジセンサー（1） ACアダプタ
	指サックを使った PPSエアバック （OT太田さん手製）		上記既製のピエゾセンサーやスポンジセンサーではうまくスイッチ操作ができない方向けの手製スイッチ	指サックのエアバック・風船・作り方付き
コール類	パーソナルコールⅡ・ 呼び鈴セット （テクノスジャパン社製）		1つのスイッチで、意思伝達装置と呼び鈴を使い分けることができる装置。（呼び鈴分岐装置）	パーソナルコール本体（2） ケーブル2種 ACアダプタ 電源ケーブル（2）
			パーソナルコールと接続し、病院/施設等でナースコール設備への報知が可能になる	ワイヤレスチャイム用受信器（1） ワイヤレスチャイム用送信器（1）
			パーソナルコールと接続し、離れた場所へのコールが可能になる	ナースコール用中継ボックス（1）
	分配コンセント BB-301WZ-2P/W6P-NC （株式会社ケアコム）		マットセンサーとナースコールの呼出を区別する	分配コンセント（1）
吸引器	ミニックWーⅡ 高吸引圧/高流量 （新鋭工業株式会社）		喀痰吸引用 質量：約5.4kg 最大吸引圧力：-85kPa 排気流量：30L/min 吸引瓶容量：1400mL 消費電力：90VA	本体のみ（1） *吸引カテーテルは付いていませんので、ご準備ください。 *ホースは衛生上購入をお願いいたします。
	ミニックDCー2 3電源対応（AC電源・バッテリー・シガーソケット） （新鋭工業株式会社）		喀痰吸引用 質量：約4.1kg 最大吸引圧力：-80kPa 排気流量：30L/min 吸引瓶容量：1400mL 消費電力：115VA	本体のみ（2） *吸引カテーテルは付いていませんので、ご準備ください。 *ホースは衛生上購入をお願いいたします。

ポータブル蓄電池	Anker PowerHouse II 800			本体（1） AC電源・シガーソケット・USB
バッテリー	（旧型）人工呼吸器T o r i l o g y 着脱式バッテリー			充電器とセットで貸し出し バッテリー100%（フル充電）で 3時間
	（新型）人工呼吸器T o r i l o g y E v o 着脱式バッテリー フィリップス			バッテリー100%（フル充電）で 7時間半
呼吸リハビリ機器	L I C トレーナー		この機器を使用し 神経難病患者さんの肺に 適切な陽圧をかける事で、 肺の柔軟性を維持・改善 人工呼吸器を使っている方も 人工呼吸器を使っていない方にも 実践できる優しい呼吸ケア	L I C トレーナー・マノメーター・ 直接コネクター・蘇生バック
文字盤	I C T 救助隊 はじめての文字盤DVDつき	以下の文字盤とセットでお貸しし、色々試せるようにします。		
	透明文字盤 50音式		一般的な50音配列 文字上に目線を安定させる固視 点付きもあり	2種類
	透明文字盤 フリック式		①同一文字サイズ ②ブロック中心の文字を大きく したもの ③ブロックの中心の文字を大き くして固視点をつけて選びやす くしたもの	3種類
文字盤	指差し文字盤 段差や穴のある文字盤		平面的な文字盤が指しづらい場 合に使う	1つ
意思伝達装置	レッツチャットと支持アーム		●いつでもどこでも簡単に会話が楽しめます。 ●テレビを操作できるリモコン機能を内蔵。 ●乾電池だけでも使用できるため外出にも最適。 ●市販のプリンタを接続することで印刷できます。	・本体 ・AC電源アダプター ・替え文字板 3種類（本体付属品と併せて全4種類）
			テーブルなどの台にはさむか、 直径1.9～7.5cmのパイプにつけて、 レッツチャットを固定する	レッツチャットとセットで貸し出し